


Guia de Coleta

A qualidade das análises laboratoriais e seus resultados dependem de uma adequada coleta, bem como ideal armazenamento e transporte de amostra até o laboratório. Recomenda-se jejum alimentar de 8 a 12 horas, com água a vontade ou a critério do médico veterinário solicitante.

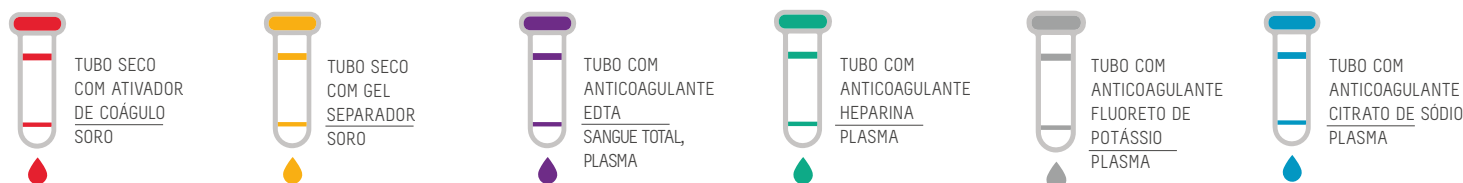

EXAME	AMOSTRA	PRAZO
Aspartato amino transferase (AST)	Soro  ,  , Plasma  , 	24h
Alanino amino transferase (ALT)	Soro  ,  , Plasma  , 	24h
Albumina	Soro  , 	24h
Análise de Líquidos Cavitários	Efusão em tubo,  ,  ,  . <i>Necessário amostras nos 2 tubos.</i>	48h
Bacteriológico	Seringa  , Swab 	Até 3 dias úteis
Bacteriológico + Antibiograma	Seringa  , Swab 	Até 5 dias úteis
Bilirrubina Direta	Soro  ,  , Plasma  ,  . <i>A amostra deve ser protegida da luz após coleta.</i>	24h
Bilirrubina Total	Soro  ,  , Plasma  ,  . <i>A amostra deve ser protegida da luz após coleta.</i>	24h
Cálcio Total	Soro  ,  , Plasma  , 	24h
Citologia	Aspirado citológico 	72h
Cloro	Soro  , 	24h
Colesterol Total	Soro  , 	24h
Contagem de Plaquetas	Sangue total 	24h
Contagem de Reticulócitos	Sangue total 	24h
Creatinina	Soro  ,  , Plasma  , 	24h
Especial Cutâneo	Envelope  , Swab 	Até 5 dias úteis
Especial Otite	Swab 	Até 5 dias úteis
Exame Parasitológico de Fezes (EPF)	Fezes em frasco limpo e estéril. 	24h
Exame Parasitológico de Ouvido (EPO)	Swab de ouvido 	24h
Exame Parasitológico de Pele (EPP)	Raspado de pele e pelos 	24h
Exame Qualitativo de Urina (EQU)	Urina em frasco limpo e estéril. 	24h
Fibrinogênio	Sangue total 	24h
Fosfatase Alcalina (FA)	Soro  ,  , Plasma 	24h
Fósforo	Soro  ,  , Plasma 	24h
Frutosamina	Soro  ,  , Plasma  , 	48h
Gama GT (GGT)	Soro  ,  , Plasma 	24h

EXAME	AMOSTRA	PRAZO
Glicose	Plasma 🟡	24h
Globulina	Soro 🔴🟡	24h
Hematócrito	Sangue total 🟣	24h
Hemograma (com Plaquetas e PPT)	Sangue total 🟣	24h
Mielograma	Realizamos coleta e análise de aspirado de medula óssea. Consulte-nos.	72h
Pesquisa de Hemocitozoário	Sangue total 🟣	24h
Pesquisa de Sangue Oculto	Fezes em frasco limpo e estéril 📦	24h
Potássio	Soro 🔴🟡	24h
Proteínas Totais	Soro 🔴🟡, Plasma 🟢	24h
Relação Albumina/Globulina	Soro 🔴🟡	24h
Relação GGT/Creatinina Urinária	Urina em frasco limpo e estéril. 📦	24h
Relação Proteína/Creatinina Urinária	Urina em frasco limpo e estéril. 📦	24h
Sódio	Soro 🔴🟡	24h
Tempo de Protombina	Plasma 🔵	24h
Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada	Plasma 🔵	24h
Teste de Compatibilidade Sanguínea	Sangue total 🟣(mínimo 2mL Doador e 2mL Receptor)	24h
Triglicerídeos	Soro 🔴🟡, Plasma 🟣	24h
Ureia	Soro 🔴🟡, Plasma 🟣🟢	24h

PCR

SANGUE EM EDTA:

Coletar um mínimo de 0,5 mL de sangue venoso ou aspirado de medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). Homogeneizar delicadamente. Coletar antes da antibioticoterapia. Enviar refrigerado.

SWAB OCULAR: (Para PCR Leishmaniose)

Coletar uma amostra de cada olho em swabes secos e estéreis. Enviar refrigerado.

URINA:

Solicitar kit de coleta. Coletar a urina por cistocentese, micção espontânea ou sondagem em recipiente apropriado (frasco coletor universal estéril). Transferir o volume coletado para o tubo do kit de coleta e refrigerar imediatamente. Coletar antes de antibioticoterapia. Enviar refrigerado.

LEITE DE TANQUE:

Quantidade mínima 30 mL. Agitar o tanque por 10 minutos. Coletar em frasco próprio para coleta ou em tubo tipo Falcon. Enviar refrigerado ou congelado.

LEITE DE TETOS:

Quantidade mínima 1 mL. Coletar em frasco próprio para coleta, tubo Falcon ou microtubo. Enviar refrigerado.

SORO:

Quantidade mínima 1 mL. Coletar 4 mL de sangue em tubo próprio para dessoragem (com gel ou sem EDTA). Aguardar a dessoragem, coletar o soro em tubo próprio. Enviar refrigerado ou congelado.

ENVIO DE AMOSTRAS:

As amostras podem ser encaminhadas para as unidades Zelle.
Observar o horário de funcionamento e recebimento de amostras.
Recebemos amostras de todo o Brasil via Correios ou Transportadoras.